ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical LD60MD-P8000A0

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів, дослідницьких зразків, реагентів та інших матеріалів. Регульований робочий діапазон +2…+16 °C. Температуру зберігання вакцин і препаратів встановлюють за інструкціями їхніх виробників. Вертикальний холодильник із Bluetooth та журналом температури для медичних закладів і лабораторій.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Регулювання температури +2…+16 °C** — через меню електронного контролера.
- **Bluetooth і CONTROLLA** — перегляд та експорт температурних даних.
- **Журнал температури** — запис кожні 20 хвилин; історія за 6 місяців.
- **Резерв контролера ≥24 год** — реєстрація та сигналізація при знеструмленні.
- **Оптична й акустична сигналізація** та пам’ять п’яти останніх тривог.
- **П’ять регульованих полиць** — нержавіюча сталь; до 40 кг на полицю.
- **Механічний замок** та самозачинення дверей.

ТЕМПЕРАТУРА
+2…+16 °C
Заводська уставка +5 °C

ОБ’ЄМ
585 / 500 л
Загальний / корисний

ДВЕРІ
Суцільні двері
Механічний замок

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
0,802 кВт·год
За 24 години

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
705 × 886 × 2085 мм
Ширина × глибина × висота

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ
535 × 712 × 1512 мм
Ширина × глибина × висота

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD60MD-P8000A0

Медичний фармацевтичний холодильник

Об’єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об’єм	585	л
2	Корисний об’єм	500	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	705 × 886 × 2085	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	535 × 712 × 1512	мм
5	Маса нетто	130	кг
6	Маса брутто без палети	147	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Тип керування	Електронне	—
8	Відображення температури	Фактична температура в камері	—
9	Оптична сигналізація	Так	—
10	Акустична сигналізація	Так	—
11	Індикація кодів несправностей	Так	—
12	Сигналізація незачинених дверей	Так (код dor)	—
13	Захист від низької температури	Так	—
14	Безпотенційний контакт тривоги	Є	—
15	Порт для додаткового зовнішнього датчика	Є	—
16	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
17	Тип внутрішнього освітлення	Верхня горизонтальна LED-смуга	—
18	Увімкнення освітлення	При відчиненні дверей	—
19	Калібрувальний блок	Є	—
20	Реєстрація температури	Вбудована пам’ять контролера	—
21	Інтервал запису температури	20	хв
22	Глибина зберігання журналу температури	6	міс.
23	Кількість збережених аварійних записів	5	записів

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD60MD-P8000A0

Медичний фармацевтичний холодильник

Керування та електроніка (продовження)

№	Характеристика	Значення	Од.
24	Бездротовий зв’язок	Bluetooth	—
25	Застосунок для роботи з даними	CAREL CONTROLLA	—
26	Експорт журналу температури та тривог	Через застосунок CONTROLLA	—
27	Індикація мінімальної температури	Так	—
28	Індикація максимальної температури	Так	—
29	Сигналізація зникнення мережевого живлення	Негайно після зникнення живлення	—
30	Резерв живлення контролера та сигналізації	Не менше 24	год
31	Охолодження від резервного акумулятора	Не забезпечується	—
32	Підключення зовнішньої сигналізації	Передбачене	—
33	Індикація аварії до ручного скидання	Так	—
34	Цифровий інтерфейс	RS485	—
35	Підключення до локальної мережі	Через зовнішню систему та RS485	—
36	Поріг захисту від низької температури	+2	°C

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
37	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
38	Максимальна температура зберігання	+16	°C
39	Заводська уставка температури	+5	°C
40	Зміна уставки користувачем	Передбачена, через меню контролера	—
41	Температурні коливання	0,6	°C
42	Температурний градієнт	1,8	°C

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD60MD-P8000A0

Медичний фармацевтичний холодильник

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
43	Система охолодження	Конвекційне, з вентиляцією	—
44	Розморожування	Автоматичне, гарячим газом	—
45	Ручний запуск розморожування	Через меню контролера	—
46	Холодоагент	R290	—
47	Зупинка вентилятора при відчиненні дверей	Так	—
48	Робота вентилятора разом із компресором	Так	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
49	Номінальна напруга	220–240	В
50	Номінальна частота	50	Гц
51	Номінальний струм	1,0	А
52	Номінальна споживана потужність	160	Вт
53	Енергоспоживання за 24 години	0,802	кВт·год
54	Річне енергоспоживання	293	кВт·год
55	Рівень звукової потужності відносно 1 пВт	53	дБ(А)
56	Довжина кабелю живлення	300	см
57	Тип вилки за даними виробника	Euro plug	—

Резервний акумулятор живить контролер, реєстрацію та сигналізацію. Охолодження компресором від акумулятора не забезпечується. Порт зовнішнього датчика не означає, що датчик входить до комплекту.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD60MD-P8000A0

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
58	Матеріал зовнішнього корпусу	Сталь	—
59	Колір зовнішнього корпусу	Білий	—
60	Матеріал внутрішньої камери	Нержавіюча сталь AISI 304	—
61	Тип дверей	Суцільні, сталь із білим покриттям	—
62	Самозачинення дверей	Так	—
63	Кут фіксації відчинених дверей	90	°
64	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
65	Тип дверного замка	Механічний	—
66	Кількість ключів від замка в комплекті	2	шт.
67	Заміна ущільнювача дверей	Передбачена	—
68	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
69	Кількість задніх регульованих опор	2	шт.
70	Мінімальна висота регульованих опор	97	мм
71	Максимальна висота регульованих опор	159	мм

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
72	Кліматичний клас	7	—
73	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
74	Максимальна температура довкілля	+35	°C
75	Максимальна відносна вологість	75	%

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
76	Загальна кількість полиць	5	шт.
77	Кількість регульованих полиць	5	шт.
78	Ширина регульованої полиці	530	мм
79	Глибина регульованої полиці	650	мм
80	Максимальне навантаження на одну полицю	40	кг
81	Матеріал полиць	Перфорована нержавіюча сталь	—
82	Кріплення полиць	На напрямних ребрах внутрішньої обшивки	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD60MD-P8000A0

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
83	Додаткові перфоровані полиці з нержавіючої сталі	Окреме замовлення	—
84	Брендування	Окреме замовлення	—
85	GSM-система сповіщення SNAIGĖ CONNECT	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
86	Назва виробу	Медичний фармацевтичний холодильник	—
87	Модель	LD60MD-P8000A0	—
88	Торгова марка	Snaige	—
89	Виробник	AB SNAIGĖ	—
90	Країна виробника	Литва	—
91	Адреса виробника	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
92	Заводський код без палети	LD60MD-P8000A01XXXXX2SN4B	—
93	EAN без палети	4770104160011	—
94	Розміри в упаковці без палети (Ш × Г × В)	768 × 948 × 2205	мм

Призначення та обмеження: не використовувати для крові, плазми, інших інфузійних рідин, хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів. Умови зберігання матеріалів — за їхніми власними інструкціями.
Дані моделі: https://snaigeprofessional.lt/products/ld60md-p8000a0/ Поточні таблиці EN/LT та технічний PDF виробника. Перевірено OSELY 17.10.2026.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Конструкція та застосування


Snaige Medical LD60MD-P8000A0



01 Приклад розміщення · візуалізація OSELY



02 Верхнє LED-освітлення

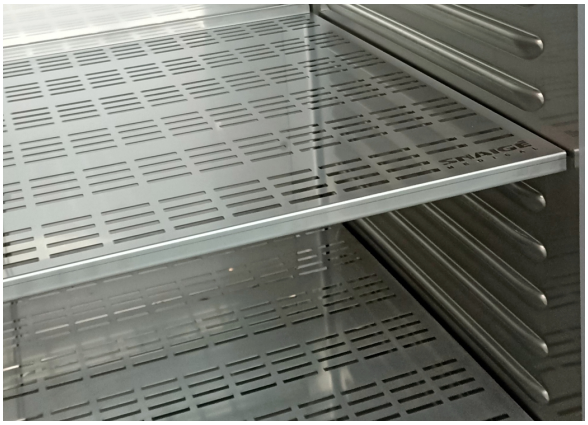

03 Перфоровані полиці з нержавіючої сталі

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua